

Masažer za stopala

Uputstvo za upotrebu

HR



SENCOR®

SFM 3720GR

SFM 3721VT

Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, čak i ako ste već upoznati sa sličnim proizvodima. Uređaj koristite isključivo prema uputama. Uputstvo sačuvajte za buduću upotrebu.

Sačuvajte izvorno pakiranje i pakiranje pošiljke, potvrdu o plaćanju i jamstveni list tijekom trajanja jamstva. Uređaj prevozite isključivo u izvornom pakiranju.

HR-1

SADRŽAJ

VAŽNE MJERE SIGURNOSTI	3
OPIS MASAŽERA ZA STOPALA	5
POZITIVNI UČINCI MASAŽERA	6
UPOTREBA MASAŽERA	6
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	7
TEHNIČKI PODACI	8
UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA	8
ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA	8

VAŽNE MJERE SIGURNOSTI

- Ovaj uređaj smiju koristiti djeca iznad 8 godina starosti i osobe smanjenih fizičkih i mentalnih sposobnosti, ili neiskusne osobe pod prikladnim nadzorom, ili ukoliko su upoznate kako koristiti ovaj proizvod na siguran način, te shvaćaju moguću opasnost. Djeci ne dozvolite igranje s uređajem.
- Uređaj ne smiju čistiti i održavati djeca ispod 8 godina starosti i ako nisu pod nadzorom. Držite uređaj i naponski kabel van dohvata djece ispod 8 godina starosti.

VAŽNE MJERE SIGURNOSTI**PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU**


- Uređaj je namijenjen upotrebi u kućanstvu.
- Prije spajanja adaptera u utičnicu, provjerite da tehnički detalji na nazivnoj deklaraciji odgovaraju električnom naponu utičnice.
- Ako uređaj koristite u kupaonici, za dodatnu sigurnost preporuča se ugradnja zaštitne strujne sklopke u strujni krug kupaonice maksimalne nazivne snage 30mA. Posavjetujte se s električarom.
- Uređaj ne koristite u neposrednoj blizini kade, tuša, umivaonika, bazena itd.
- Ne koristite ga na otvorenom. Ne izlažite uređaj direktnoj sunčevoj svjetlosti. Ne postavljajte ga u blizinu otvorenog plamena i drugih izvora topline.
- Uređaj koristite na ravnoj, suhoj i stabilnoj površini.
- Kako bi izbjegli opasnost od električnog udara, uređaj i kabel ne uranjajte u vodu ili bilo kakvu drugu tekućinu.
- Pobrinite se da kontakti utikača ne dođu u dodir s vodom ili vlagom.
- Ne prskajte uređaj vodom ili drugom tekućinom. Ne perite ga tekućom vodom niti uranjajte u vodu ili bilo kakvu drugu tekućinu.
- Ne ukopčavajte kabel u električnu utičnicu ako su vam stopala u vodi.
- Uređaj koristite samo u sjedećem položaju. U kadu masažera ne ulazite punom težinom niti ne stavljajte predmete u nju.
- Ne preporučamo upotrebu uređaja ako su vam stopala otekla, imate osip, ili ako vam je koža na stopalima upaljena ili nadražena. Prestanite koristiti uređaj ako osjećate bol, mučninu ili vam koža postane nadražena. Posavjetujte se s liječnikom.
- Prije ukopčavanja uređaja u električnu utičnicu, provjerite da je upravljački brojačnik u poziciji OFF (isključen).
- Uređaj uvijek isključite i iskopčajte prije pomicanja ili čišćenja.
- Ne iskopčavajte iz naponske utičnice povlačeći za kabel. Time možete oštetiti kabel ili utičnicu. Iskopčajte uređaj iz utičnice laganim povlačenjem utikača.
- Zabranjeno je koristiti uređaj s oštećenim naponskim kabelom ili utikačem. Ako je naponski kabel oštećen, zamijenite ga u ovlaštenom servisnom centru.
- Uređaj ne koristite ako je neispravan, pokazuje znakove curenja (ako iz njega curi voda), ako je oštećen ili uronjen u vodu. Kako bi izbjegli opasnost od električnog udara, uređaj ne popravljajte sami niti činite ikakve preinake. Sve popravke i preinake vršite isključivo u ovlaštenom servisnom centru. Neovlašteno servisiranje uređaja tijekom jamstvenog roka može poništiti jamstvo.

Masažer za stopala

SFM 3720GR/SFM 3721VT

HR

OPIS MASAŽERA ZA STOPALA

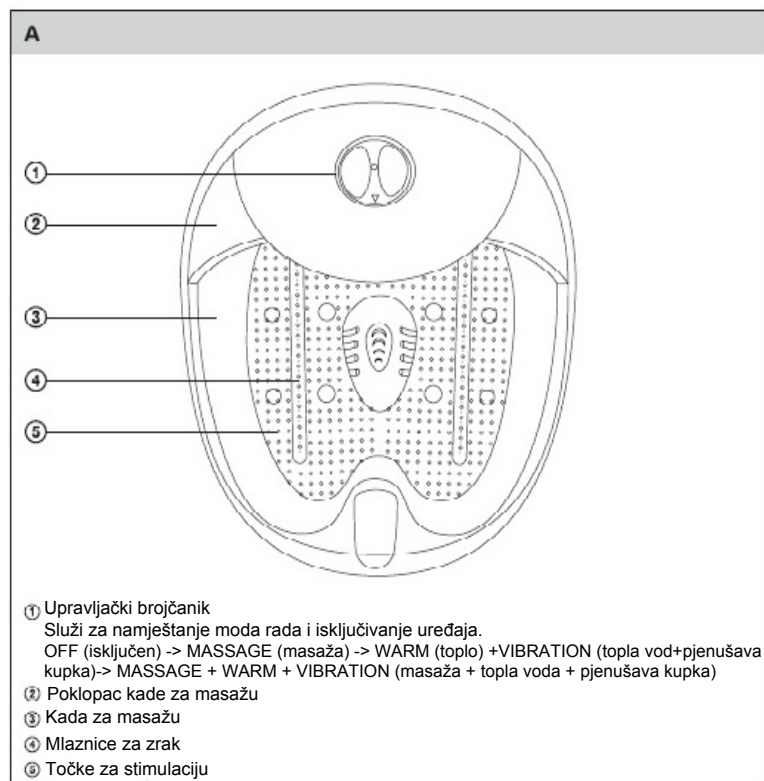

HR-5

POZITIVNI UČINCI MASAŽERA ZA STOPALA

- Točke za stimulaciju pritišću nježno kao prsti i pružaju učinkovitu masažu. Na intenzitet masaže se može učinkovito djelovati guranjem stopala na točke za stimulaciju ili odmicanjem. Mlaznice zraka stvaraju ugodnu pjenušavu kupku. Kupka s toplom vodom podržava pozitivne učinke masaže i pjenušave kupke. Uređaj je opremljen grijaćim elementom koji sprečava pad temperature vode kupke. Za bržu regeneraciju i poboljšanje cirkulacije i prokrvljenost kože, priuštite stopalima ugodnu opuštajuću masažu u pjenušavoj kupci svaki dan.

UPOTREBA MASAŽERA ZA STOPALA

1. Uređaj postavite na ravnu, suhu i stabilnu površinu. Ugrađene nožice protiv proklizavanja spriječit će pomicanje uređaja.
2. Provjerite da je uređaj isključen. Upravljački brojčanik A① je namješten na OFF (isključen).
3. Napunite masažnu kadu A③ čistom vodom. Pobrinite se da razina vode ne premašuje oznaku maksimalne razine vode (MAX) na unutarnjoj stijenci kade A③.



Napomena:

Koristite samo čistu vodu bez dodataka poput sapuna, šampona itd.

4. Ukopčajte kabel uređaja u električnu utičnicu. Sjednite i provjerite da su vam stopala čista. Uronite ih u vodu.




Pažnja:

Ne ulazite u kadu A③ cijelom težinom. Možete ju oštetiti.

5. Okrenite upravljački brojčanik A① za odabir jednog od modova rada:

5.1 MASAŽA

Masaža stopala u kadi s vodom bez zagrijavanja vode.

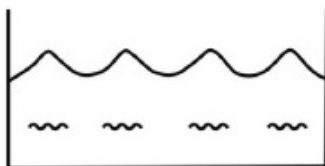B


Masažer za stopala

SFM 3720GR/SFM 3721VT

HR


5.2 TOPLINA + VIBRACIJA (MJEHURIĆI)

Pjenušava vodena kupka koja održava toplinu, opušta i umiruje stopala.

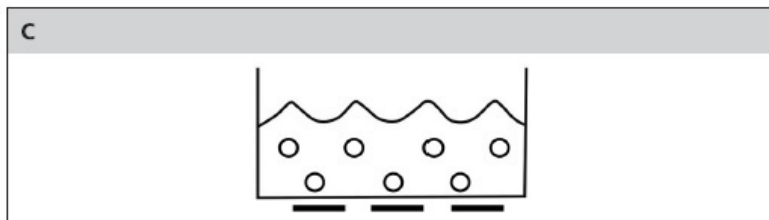

5.3 MASAŽA + TOPLINA + VIBRACIJA (MJEHURIĆI)

Masaža vodom u toploj kupki, prikladna za osvježanje umornih stopala, poboljšanje krvotoka te opskrbu stopala krvlju.

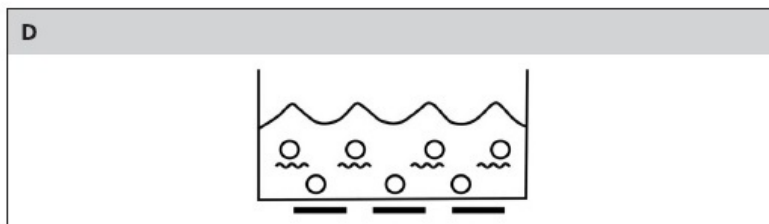

Napomena:

Preporučeno trajanje masaže je 15 minuta. Podesite ga prema vlastitim potrebama. Ne smije trajati dulje od 30 minuta.

6. Nakon upotrebe, okrenite upravljački brojčanik A① a poziciju OFF (isključen). Stopala izvadite iz kade A③ i osušite ručnikom. Iskopčajte kabel iz utičnice. Uklonite vodu iz kade A③ nakon svake upotrebe i očistite ju prema uputama u poglavlju Čišćenje i održavanje.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja, provjerite da je uređaj isključen i iskopčan iz električne utičnice.
- Nakon svake upotrebe uklonite vodu iz kade A③. Isperite kadu A③ čistom vodom i ostavite da se osuši.
- Ako je površina uređaja prljava, obrišite ju krpom lagano umočenom u toplu vodu i neutralno sredstvo za čišćenje. Krpu namočenu toplom vodom ili blagom otopinom sredstva za čišćenje za brisanje površine na koju ste nanijeli sredstvo za čišćenje. Zatim sve obrišite suhom krpom.
- Nikada ne uranjajte uređaj u vodu!
- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, otapala, razrjeđivače i sl. za čišćenje.

Masažer za stopala

SFM 3720GR/SFM 3721VT

TEHNIČKI PODACI

Nazivni napon	230 V
Nazivna frekvencija.....	50 Hz
Naivna ulazna snaga.....	90 W
Klasa sigurnosti (za zaštitu od električnog šoka)	II
Razina zaštite od oštećenja ulaskom vode.....	IPX4

Rječnik tehničkih pojmova

Sigurnosna klasa za zaštitu od električnog udara:

Klasa II – Zaštita od električnog udara predviđena je dvostrukom izolacijom.

Razina zaštite od oštećenja ulaskom vode:

IPX4 - uređaj je zaštićen od prskanja vodom.

Zadržavamo pravo izmjene teksta i tehničkih parametara.

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA

Staro pakiranje obavezno odložite na javno odlagalište otpada.

ODLAGANJE STARIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA



Ovaj simbol, koji se nalazi na proizvodu, raznim dodacima za njega ili samom pakiranju, označava da se proizvod ne smije baciti u kućni otpad. Molimo, proizvod odložite na lokalno reciklažno dvorište namijenjeno reciklaži električnog i elektroničkog otpada. U pojedinim državama Europske unije, ali i izvan nje, možete ga vratiti u trgovinu kada kupujete sličan novi proizvod. Pravilnim ćemo odlaganjem pomoći očuvati vrijedne prirodne resurse i spriječiti mogući negativni utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi, do čega može doći upravo nepravilnim odlaganjem otpada. Za detaljnije informacije obratite se mjesnim vlastima ili najbližem reciklažnom dvorištu. Nepravilno odlaganje ovakve vrste otpada može biti podložno državnim kaznenim propisima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ako želite pravilno odložiti električni ili elektronički uređaj, potrebne informacije zatražite od prodavača ili dobavljača robe.

Odlaganje u zemljama izvan Europske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, za sve potrebne informacije o pravilnim načinima odlaganja obratite se mjesnoj upravi ili prodavaču.

Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne uvjete koje propisuju uredbe EU-a, a koje se odnose na njega.

